


# FFK II (Facet Fusion Kit)


名古屋第二赤十字病院・佐藤公治先生ご考案

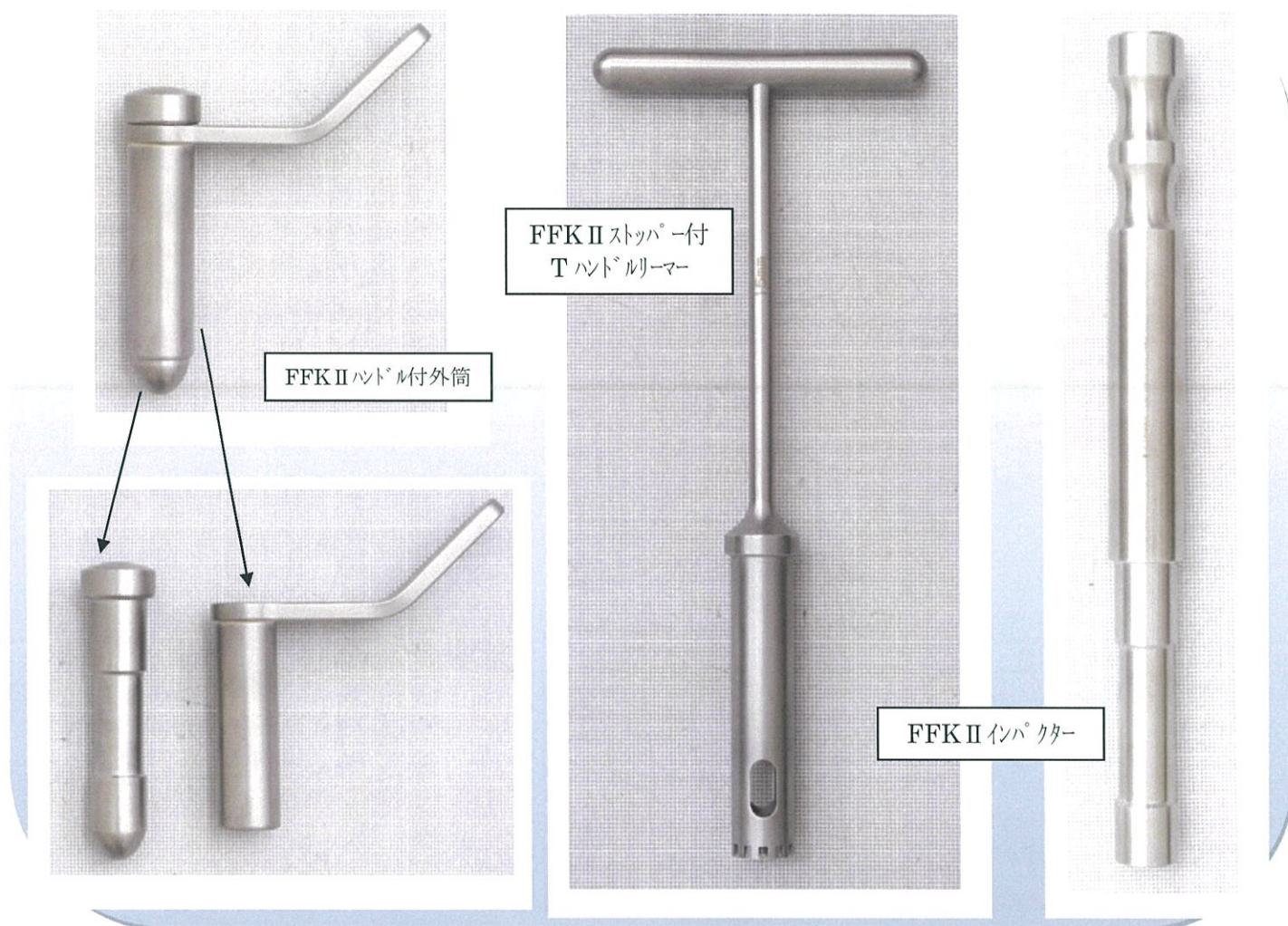

## MIS 手技にて

Facet Fusion を行うためのツールです。

- ① FFK II ハンドル付外筒を経皮的に挿入し、椎間関節上に設置します。
- ② FFK II ハンドル付外筒の内芯を取り除き、関節周囲を止血します。
- ③ 外筒に FFK II ストップ付 Tハンドルリマーを挿入し、骨を切削します。
- ④ 切削した骨を FFK II インパクトで圧着し移植します。

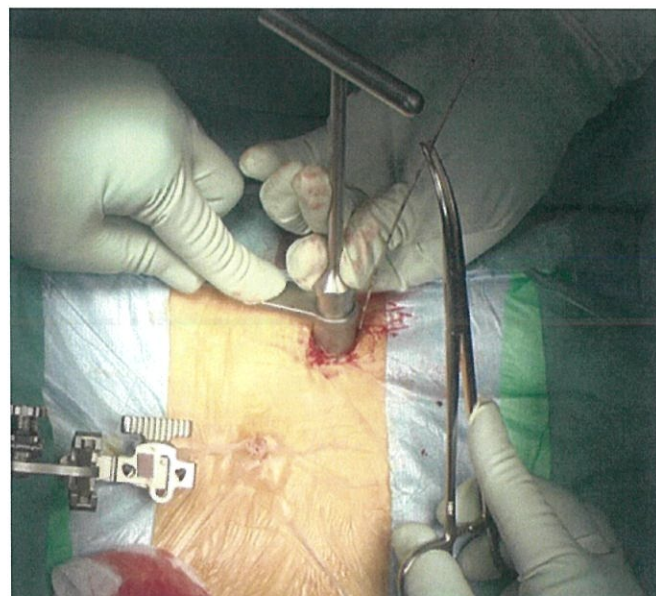

製造販売元：株式会社 田中医科器械製作所 TEL 03-3894-7700 FAX 03-3894-7795

総販売元：ウィズメディック株式会社 TEL 0586-75-3800 FAX 0586-75-3815




## 脊椎手術器械シリーズ

# NM鋭匙セット

「効率と安全」をテーマに企画・設計から製造まで  
厳しい品質管理のもとに製作される日本製脊椎手術用デバイスです。

効率のよい両刃形状  
(ストレートタイプ)

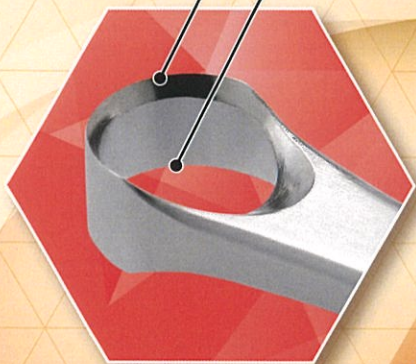

ストレート



カーブネック (右)

カーブネック (左)

ノミ

NM鋭匙セット

届出番号：23B3X10015000026

- ストレート、カーブネック (左右)・ノミの4本セット
- 外径φ8 (標準) ご要望に合わせてφ4・φ6をご用意 (オプション)
- 作業性を向上させる両刃形状を採用 (ストレートタイプ)
- 滑りにくく軽量のチタン合金製グリップ (ステンレスモデルもあります)

製造業・製造販売業

西島メディカル株式会社

〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町諸輪字百々51番地92  
TEL. 0561-37-1222

総販売元

ウィズメディック株式会社

〒491-0873 愛知県一宮市せらい1丁目8番18号  
TEL. 0586-75-3800



人と人の繋がりで感動を！  
知を学び、質を高め、  
心豊かな医療を！



**ウィズメディック株式会社**

〒491-0873 愛知県一宮市せんい1丁目8番18号  
TEL:0586-75-3800 FAX:0586-75-3815